


ボシュロムの乱視矯正テクノロジー「プリズムバラストデザイン」


ボシュロムの乱視用ソフトコンタクトレンズに採用されている「プリズムバラストデザイン」は、装用中の目の動きによるレンズの回転を防ぎ、レンズを常に正しい位置に安定する技術です。

ボシュロムのすべての乱視用ソフトコンタクトレンズは、このプリズムバラストデザインをベースに、一般の乱視用レンズに起こりがちだったレンズ厚の不揃いをなくし、すべての乱視パターンにおいてレンズ軸の安定を図りました。まばたきする度に視界がゆがんで見えにくくなる、といった不具合を解消し、常にクリアな視界を実現します。

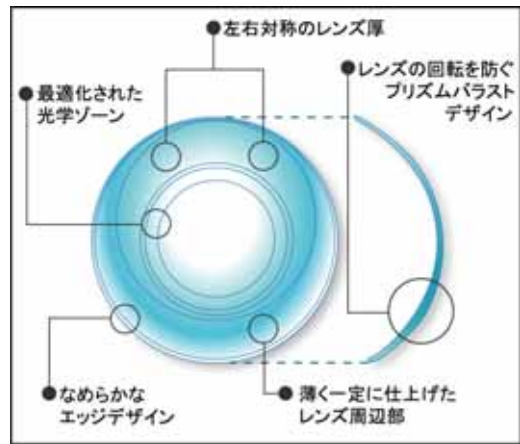

ボシュロム メダリスト プレミア 乱視用 の特長

ボシュロム メダリスト プレミア 乱視用 は、ソフトコンタクトレンズ素材として理想的なシリコーンハイドロゲル素材を採用し、クリアな視界と快適な装用感を実現する2ウィークタイプのコンタクトレンズです。

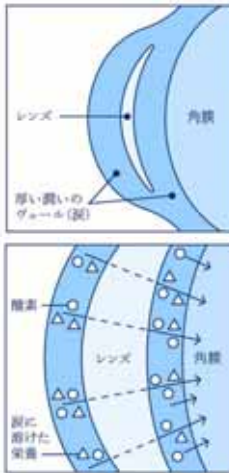

目の乾きに強く、潤いが持続

人工血管にも使われているシリコーンハイドロゲルは、レンズのまわりに厚い潤いのヴェールをつくるので、乾きに強く1日中潤いつづける快適なつけ心地です。

大切な目の健康のために

シリコーンハイドロゲルは、酸素や涙に溶けた栄養成分なども透過します。酸素は、目を開いた状態で裸眼の98%、まばたきの瞬間でさえ94%が瞳に届きます。また、汚れや細菌を寄せつけない表面加工で、レンズ表面を常に清潔に保ちます。

ボシュロム メダリスト ワンデー プラス 乱視用 の特長

ボシュロム メダリスト ワンデー プラス 乱視用 は、3つの要素が相乗効果を発揮するコンフォート モイスト テクノロジーを採用。涙の力を効率よく活用し、本物のうるおい感が夜まで持続するワンデータイプのコンタクトレンズです。

まばたきする度に、涙がレンズ全体に行き渡る


レンズ周辺部のカーブを緩やかに、厚さも可能な限り薄くすることによって、まばたきがしやすく、まばたきするたびに涙がレンズ全体に広がりやすくなっています。

「うるおい成分」が涙を引き寄せる

レンズ保存液に、涙を引き寄せる「うるおい成分」を配合。レンズ全体を涙のヴェールで包み込みます。

汚れがつきにくい非イオン性素材

レンズがマイナスイオンを帯びていないので、汚れを引き寄せにくく、乾燥しにくくなっています。

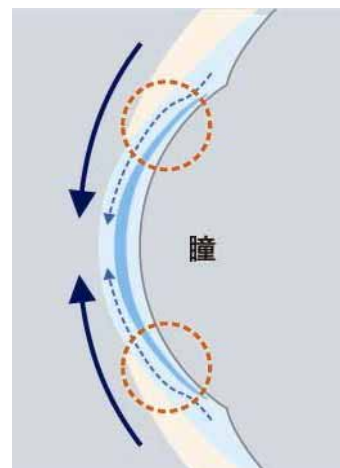

涙が広がるメカニズム



製品概要

製品名	ボシュロム メダリスト プレミア 乱視用	ボシュロム メダリスト ワンデー プラス 乱視用
医療機器承認番号	22000BZX00896000	21700BZY00170000
品目	乱視用2週間交換ソフトコンタクトレンズ	乱視用1日使い捨てソフトコンタクトレンズ
パッケージ	1箱レンズ6枚入り/片眼約3ヵ月分	1箱レンズ30枚入り/片眼約1ヵ月分
販売価格	オープン価格	オープン価格
取り扱い	全国の眼科施設、 コンタクトレンズ専門店、眼鏡店等	全国の眼科施設、 コンタクトレンズ専門店、眼鏡店等
発売日	2008年10月20日(月)	2008年11月17日(月)