


## ■「ワンデー アクビュー ディファイン」<ナチュラル シャイン> 製品特徴

### ① 大きく見えるダークグレーのリングに、ライトブラウンのハイライトで、より自然に！

大きく見えるダークグレーのリングにライトブラウンのハイライトのレイヤーを重ねた、より自然なデザインです。「ワンデー アクビュー ディファイン」シリーズ初の2色のコンビネーションと、繊細なデザインで、ナチュラルに印象的に。

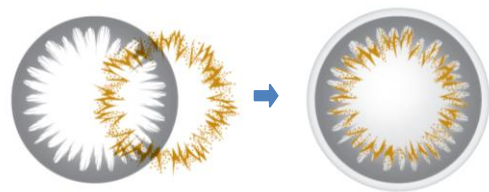

### ② 視界を妨げず、大きく見せるデザイン


スポークデザイン(環状着色部分)の外径は 12.7mm と自然な大きさです。また、装用時にデザインが視界の妨げにならないように、環状着色部分の内径は 6.6mm と広めに設計しています。

\*ただし、装用状態によっては暗い場所などで見えにくい場合がありますのでご注意ください。



### ③ 色素が瞳に直接触れないサンドイッチ構造

瞳の健康を考え、色素がレンズ素材の間に挟まれている「サンドイッチ構造」を採用。色素が直接目に触れることはなく、表面も滑らか。

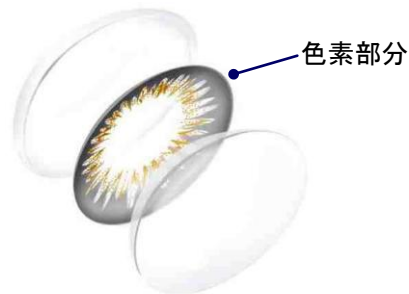

### ④ 瞳の健康を考えた毎日新品レンズ

1日使い捨てタイプだから、毎日、滅菌された新しいレンズをつけるので、清潔で、快適な装用感。紫外線 B 波を約 97%、A 波を約 81%カット<sup>\*3</sup>。

<アクセント スタイル>、<ヴィヴィッド スタイル>と同様、安全性試験が行われた、「高度管理医療機器」です。

レンズの構造<イメージ図>

## ■3つのデザインから選ぶ「ワンデー アクビュー ディファイン」シリーズ

それぞれ異なる印象を持つ3つのデザインだから、メイクやファッション、なりたいイメージ、瞳の色にあわせて。

### NATURAL SHINE™

ナチュラル シャイン™



弊社従来品装用中



★NEW!



<ナチュラル シャイン™>装用中

★大きく見えるダークグレーのリングに、ハイライトのレイヤーを重ねた、より自然なデザイン。どんなシーンでも浮かないナチュラルな印象に。

### ACCENT STYLE

アクセント スタイル



弊社従来品装用中



<アクセント スタイル>装用中

★エッジをくっきりと際立たせる、ブラックのサークルラインで、凛として印象的。

### VIVID STYLE

ヴィヴィッド スタイル



弊社従来品装用中



<ヴィヴィッド スタイル>装用中

★大きさを際立たせて、自然になじむ、ダークブラウンのスポークデザインで、明るくキュート。

## ■人気サイト『StyleWalker』にも、<ナチュラル シャイン™>が登場！

日本最大級のファッションコミュニティサイト『StyleWalker』で、2010年1月26日(火)から<ナチュラル シャイン™>発売をカウントダウンするティザーページがモバイルサイトでオープン。さらに発売日の2月5日(金)からは、読者モデルブログで<ナチュラル シャイン™>が紹介されます。

### 【モバイルサイト URL】

[http://www.style-walker.com/mob\\_sw/pages/public/acuvue/](http://www.style-walker.com/mob_sw/pages/public/acuvue/)

### 【主なコンテンツ】

#### ◎「トレンドリサーチ 2010」

人気読者モデル4名が、2010年春のおすすめトレンドアイテムを教えてくれるコンテンツ。

#### ◎「オリジナルドールアイテム」

この春欲しいアイテムをテーマに、読者モデルがプロデュースしたオリジナルアバター。2月5日(金)からは<ナチュラル シャイン™>を使ったスペシャルアイテムを配信。

#### ◎「フリートライアル」

新デザイン<ナチュラル シャイン™>をはじめとした、「ワンデーアキュビュー ディファイン」シリーズが実際に体験できるフリートライアルプログラムを紹介。



## ■製品概要

製品名	「ワンデー アキュビュー ディファイン」 <ナチュラル シャイン>		
発売日	2010年2月5日全国発売		
価格	オープン価格		
内容	1箱30枚入り		
承認番号	21700BZY00541000		
販売名	「ワンデー アキュビュー ディファイン a」		
材質	エタフィルコン A		
ベースカーブ	8.5mm		
直径	14.2mm	中心厚	0.084mm (-3.00D の場合)
パワー範囲	-0.50D ~ -6.00D (0.25D ステップ)	酸素透過係数 <sup>*1</sup> (Dk 値)	28.0
	-6.50D ~ -9.00D (0.50D ステップ)	酸素透過率 <sup>*2</sup> (Dk/L 値)	33.3(-3.00D の場合)
	±0.00D, +0.50D, +1.00D	含水率	58%
環状着色部 外径/内径	12.7mm / 6.6mm	紫外線対策	紫外線 B 波を約 97%カット <sup>*3</sup> 紫外線 A 波を約 81%カット
環状着色	ダークグレー / ライトブラウン	着色剤(環状着色部)	金属酸化物系着色剤

\*1:  $\times 10^{-11}(\text{cm}^2/\text{sec}) \cdot (\text{mLO}_2/\text{mL} \cdot \text{mmHg})$  測定条件 35°C

\*2:  $\times 10^{-9}(\text{cm} \cdot \text{mLO}_2/\text{sec} \cdot \text{mL} \cdot \text{mmHg})$  測定条件 35°C

\*3: Johnson & Johnson VISION CARE, INC. データより

UV 吸収剤を配合したコンタクトレンズは、UV 吸収サングラスなどの代わりにはなりません。

◎ コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず事前に眼科医にご相談の上、検査・処方を受けてお求め下さい。

◎ ご使用前に必ず添付文書をよく読み、取扱い方法を守り、正しく使用してください。

## **<ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニーについて>**

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニーは、1991年に世界初の使い捨てコンタクトレンズ「アキュビュー」を日本に導入して以来、常に使い捨てコンタクトレンズ市場をリードし続けてきました。現在、様々なユーザーのニーズにお応えするため、11種類のタイプの異なる使い捨てコンタクトレンズをラインアップしています。